
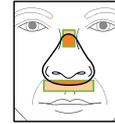


Guia de ajuste do médico e do paciente para as máscaras ComfortGel Blue, ComfortGel, ComfortFusion e ComfortSelect

Medição da almofada

Coloque o medidor sobre o nariz. O medidor está disponível tanto como uma peça de plástico separada quanto na embalagem da máscara.

Escolha o menor tamanho que seja largo o suficiente e se estenda além das narinas mas que não obstrua a respiração normal pelo nariz.

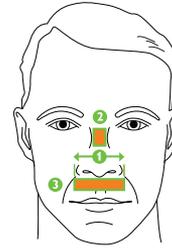

- Pontos de referência faciais
1. Lados das narinas
 2. Área da ponte do nariz
 3. Abaixo da ponta do nariz, acima do lábio

Preparando a máscara para o ajuste



Afrouxe as tiras no fixador da máscara ajustando as abas de Velcro.



Aperte suavemente as laterais do seletor de estabilidade e deslize o braço para cima colocando o apoio de testa em sua posição mais alta.



Desconecte um lado do fixador da máscara soltando o clip de fixação esférico da presilha da estrutura facial.

Fazendo os ajustes iniciais



Faça os ajustes iniciais sentado.

Coloque a almofada contra a face.



Puxe o fixador da máscara sobre a cabeça.



Fixe clip de fixação esférico no lado desconectado. Para fixar o clip facilmente, use o dedo indicador como guia para encontrar a posição e pressione o clip para dentro da cavidade.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

Fazendo os ajustes iniciais (continuação)



Ajuste as duas tiras superiores do fixador da máscara usando as abas. Certifique-se de elas estejam apertadas por igual e de que a almofada de testa esteja **levemente** encostada na testa.



Ajuste as tiras da parte inferior do fixador da máscara usando as abas. Certifique-se de que elas estejam apertadas por igual e de que a máscara esteja **suavemente** encostada no rosto. **Não** aperte demais o fixador da máscara.



Certifique-se de que as tiras do fixador da máscara estejam paralelas e de que o fixador da máscara esteja estendido e nivelado completamente por trás da cabeça.

Fazendo os ajustes finais



Conecte o tubo ao cotovelo articulado e ative o fluxo de ar.



Faça os ajustes finais deitado.

Se a almofada de testa não repousar contra a testa suavemente, ajuste a tira superior do fixador da máscara.



Se necessário, ajuste a tira inferior do fixador da máscara para que a máscara fique firme, porém confortável, contra o rosto. **Não** aperte demais o fixador da máscara.

Identificando fugas

Deitado na cama, aumente a pressão até o nível indicado e gire a cabeça de um lado para outro.

Identifique as áreas de fuga que possam impedir o sono.



Ajustes em caso de fugas

Em caso de fugas, siga estes métodos recomendados para obter uma vedação melhor:

1. Recoloque a máscara. Puxe a máscara para longe do rosto diretamente e recoloque-a no lugar suavemente. Isto permite que a almofada crie uma nova vedação no rosto.



2. Ajuste o braço de apoio de testa do seletor de estabilidade para corrigir vazamentos. **Este é um passo importante no processo de ajuste.**



Problema: Fugas ao redor da ponte do nariz ou em direção aos olhos.

Solução: Ajuste o braço de apoio de testa para uma posição mais baixa apertando levemente os braços do seletor de estabilidade e deslizando-o para baixo para uma posição mais baixa. Isso aproximará a parte de cima da almofada do rosto. Se necessário, recoloque a máscara mais uma vez.



Problema: Fugas abaixo do nariz ou próximos aos lábios.

Solução: Ajuste o braço de apoio de testa para uma posição mais alta apertando levemente os braços do seletor de estabilidade e deslizando-o para cima para uma posição mais alta. Isso aproximará a parte de baixo da almofada do rosto. Se necessário, recoloque a máscara mais uma vez.



3. Aperte o fixador da máscara. Se ainda houver fugas, pressione com os dedos diretamente na máscara e no local da fuga. Se isso eliminar a fuga, aperte as tiras do fixador da máscara mais próximas da fuga para acomodar a vedação. **Não** aperte demais o fixador da máscara.



Observação: Apertar o fixador da máscara excessivamente pode causar um desconforto desnecessário e fugas. Lembre-se de que nem todos as fugas precisam ser corrigidas.

Removendo a máscara

Para retirar a máscara, desconecte um ou os dois clips esféricos. Segure a parte de baixo do fixador da máscara na parte de trás da cabeça e puxe a máscara para cima e por sobre a cabeça suavemente.

Use os clips de fixação esféricos para retirar a máscara e para manter os ajustes da máscara e do fixador da máscara no dia-a-dia.





Dicas de ajuste

Se o fixador da máscara for comprido demais desde a parte de cima da cabeça até a parte de cima do pescoço, enrole a fita da parte de baixo do fixador da máscara por cima ou por baixo para conseguir um ajuste melhor. O clip de fixação esférico girará para se ajustar ao novo comprimento.



Fixação da almofada da ComfortFusion e ComfortSelect

Todas as três peças—a estrutura facial, a almofada e o anel de retenção—têm marcas de alinhamento pretas para simplificar o alinhamento e fixação da almofada.

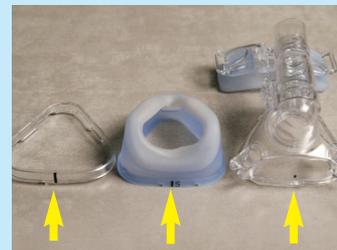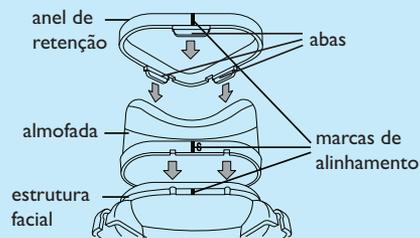

1. Coloque a almofada no lado de fora da estrutura facial, alinhando as marcas de alinhamento pretas e ajustando os recortes na almofada por sobre os chanfros na estrutura facial.



2. Posicione o anel de retenção na almofada com as abas viradas para baixo usando as marcas de alinhamento pretas.



3. Deslize o anel de retenção com as abas viradas para baixo por volta da almofada e pressione firmemente até que todos os três lados se encaixem no lugar.



4. Puxe suavemente a almofada e o anel para se assegurar de que todas as partes estejam firmemente presas no lugar.

Remoção do anel de retenção e da almofada da ComfortFusion e da ComfortSelect

Para retirar o anel de retenção da ComfortFusion ou da ComfortSelect que mantém a almofada no lugar na estrutura facial:

1. Levante sob a aba em cada um dos lados do anel.
2. Remova o anel e almofada.
3. Separe a almofada do anel.




Fixação da almofada da ComfortGel Blue e da ComfortGel



1. Coloque a almofada dentro da estrutura facial certificando-se de que o chanfro para o nariz esteja para cima (mais próximo da almofada de testa).



2. Posicione a aba de conforto com o anel integrado na almofada – mais uma vez com o chanfro para o nariz em cima e o indicador de tamanho embaixo.

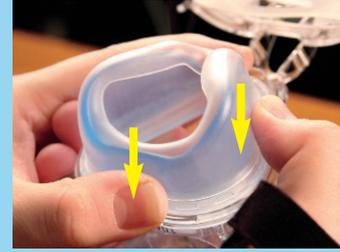

3. Deslize a aba e o anel para baixo por cima da almofada e pressione firmemente até que os três lados se encaixem no lugar.



4. Puxe suavemente a almofada e o anel para se assegurar de que todas as partes estejam firmemente presas no lugar.

Remoção da almofada da ComfortGel Blue e da ComfortGel

Para retirar a almofada e a aba de conforto, levante sob a base em cada lado do anel de retenção.



**A Philips Healthcare é parte integrante
da Royal Philips Electronics**

Para falar conosco

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Ásia

+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Médio e África

+49 7031 463 2254

América Latina

+55 11 2125 0744

América do Norte

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atendimento ao Cliente Estados Unidos

+1 724 387 4000

800 345 6443 (ligação gratuita, Estados
Unidos somente)

Philips Respironics Sede Internacional

+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Brasil

0800 701 7789

www.philips.com/respironics

www.philips.com.br/respironics

Respironics, Comfort Flap, ComfortGel, EZ Peel, Quick Clip e StabilitySelector são marcas comerciais da Respironics, Inc. e de suas afiliadas, todos os direitos reservados.

Visite www.philips.com.br/respironics



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a qualquer momento, sem necessidade de avisos prévios ou obrigações outras, não sendo responsável por consequências resultantes do uso desta publicação.

NA 02/02/12 MCI 4103564 Registro Anvisa: 10216710208